

seT



(seT capsules)

SELF ETCHING, SELF ADHESIVE RESIN CEMENT

SELBSTÄTZENDER, SELBSTKLEBENDER KUNSTSTOFF-ZEMENT

CIMENTO RESINOSO AUTO-CONDICIONANTE E AUTO-ADESIVO

CEMENTO DE RESINA, AUTOGRABANTE Y AUTOADHESIVO

RÉSINE DE SCELLEMENT AUTO-ADHÉSIVE AUTO-MORDANÇANT

CEMENTO COMPOSITO AUTOMORDENZANTE ED AUTOADESIVO

ZELF ETSEND, ZELF ADHESIEF RESIN CEMENT

SELVÆTSENDE, SELVADHÆRERENDE RESIN CEMENT

SELVETSENDE, SELVBINDENDE RESIN SEMENT

ITSE-ETSAAVA, ITSEKIINNITTYVÄ MUOVISEMENTTI

ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ, ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ

SAMOWYTRAWIAJĄCY CEMENT KOMPOZYTOWY NIE WYMAGAJĄCY UŻYCIA SYSTEMU WIAŻĄCEGO

ÖNSAVAZÓ ÉS ÖNKÖTŐ MŰGYANTABÁZISÚ RAGASZTÓCEMENT

ISESÖÖVITAV, ISEADHESEERUV TSEMENT

SAMOJEDKAJOČ, SAMOADHEZIVEN SMOLNAT CEMENT

PAŠKODINOŠS, PAŠADHEZĪVS SVEKU CEMENTS

SAVAIME ĒSDINANTIS BEI SURIŠANTIS DERVŪ CEMENTAS

SAMOLEPTACÍ, ADHEZIVNÍ CEMENT ZESÍLENÝ PRYSKYŘICÍ

SAMOLEPTACÍ, ADHEZÍVNÝ, ŽIVICOVÝ CEMENT

셀프 에칭, 셀프 어드헤시브 레진시멘트

自酸蚀、自粘结树脂粘结剂



SDI



SDI's top rated cement, seT now available in syringes


seT



seT 는 메탈, 레진, 지르코니아, 올세라믹, 세라믹 베이스 수복재의 파이널 시멘테이션을 위해 개발된 셀프 에칭, 셀프 어드헤시브 레진 시멘트입니다. seT 는 치아와 모든 종류의 코어재료에 화학적으로 접착되며, 캡슐과 페이스트 타입의 시린지 형태로 공급됩니다.




특허받은 필러 기술 **ionglass™**
seT 는 SDI 의 *ionglass™* 연구원들에 의해 개발된 SDI 특허 *ionglass™* 필러를 사용합니다. *ionglass™* 는 SDI 의 모든 치과용 시멘트에 사용되는 높은 방사선불투과성, 우수한 이온방출을 가진 reactive glass 입니다. seT 는 불소방출이 매우 높아 자연치아의 재광화에 도움을 줍니다.

높은 불소방출
seT 의 불소의 자유로운 이동은 치아에 많은 이점을 줍니다. 불소는 치아우식 예방에 많은 역할을 합니다. Hydroxyapatite 보다 산에 대한 저항성이 높은 Fluorapatite 를 형성합니다. Fluorapatite 는 치아의 미네랄보다 더 강하며, 치아우식을 예방하는데 도움을 줍니다.

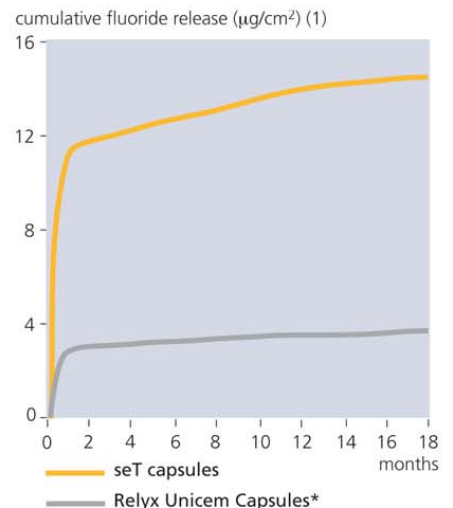

Fast and easy

seT 는 에칭, 본딩, 필링을 한 번에 할 수 있는 올인원 루팅시멘트입니다. seT 를 적용한 후 바로 수복물을 위치시키면 됩니다. 낮은 필름두께와 흐름성을 가지고 있어 수복물을 손쉽게 세팅할 수 있습니다.

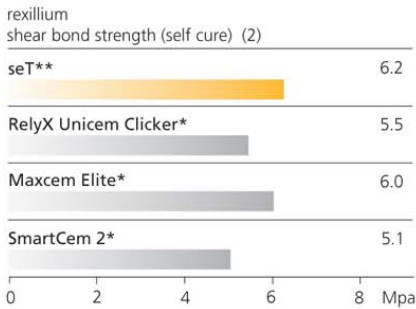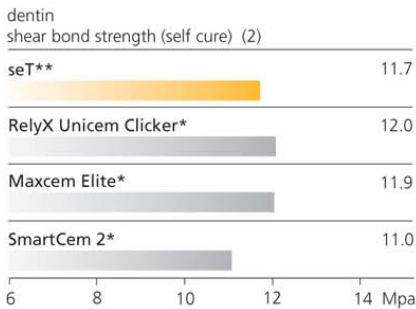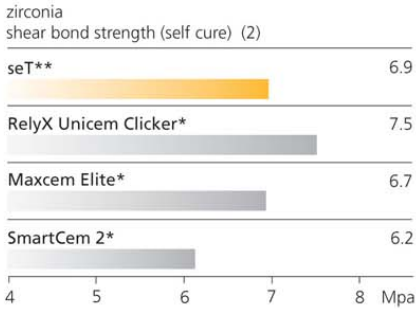

No Bisphenol A or HEMA

seT 는 Bisphenol A 혹은 HEMA 를 포함하고 있지 않습니다. 환자에게 안전하게 사용하십시오.

Dual cure

광중합과 자가중합을 동시에 할 수 있어, 모든 시멘테이션에 사용할 수 있는 이상적인 루팅시멘트입니다^.

방사선 불투과성

X-ray 사진에서 쉽게 구별되어 진단이 쉽습니다.

시술 후 민감성이 없는 루팅시멘트

seT 는 별도의 에칭과 세척과정이 없기 때문에, Smear layer 가 살아있어 치아를 보호합니다. 이 Smear layer 를 제거하지 않는다면, 시술 후 민감성은 현저하게 감소됩니다.

다양한 팁

seT PP 시린지는 다양한 도포형태를 가지고 있습니다. Regular mixing tip 은 크라운과 브릿지를 도포하는 데 매우 효과적이며, Wide mixing tip 에 끼워서 사용할 수 있는 Endodontic tip과 intraoral tip 도 제공됩니다.



매우 다양한 쉐이드

5가지 쉐이드 제공 : Translucent, A1, A2, OA3, Opaque White. 다양한 쉐이드는 심미성을 증가시키는데 도움을 줍니다.

용도

- 메탈, 레진, 지르코니아, 올세라믹, 세라믹 베이스의 인레이, 온레이^, 브릿지, 크라운의 시멘테이션.
- 핀, 포스트, 스크류 시멘테이션.

^ 비니어를 할 경우에는 유지력을 향상시키기 위해 seT 를 적용하기 전에 먼저 본딩재를 사용하십시오.
**seT PP.

사용 방법:


- 1 템포러리 시멘트 잔여물을 제거하고 깨끗이 행구십시오. Excess water를 제거하고, Moist 한 상태를 유지시키십시오.



- 2 제조사의 사용설명서에 따라 수복물을 준비하고 Fit 을 체크하십시오.



- 3 수복물과 치아의 모든 본딩 부위에 골고루 시멘트를 도포합니다.

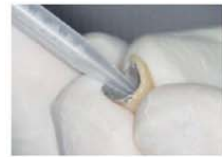

- 4 Excess 제거를 위해 2초간 Tack cure 하거나 2분 동안 기다립니다.



- 5 Excess 를 제거합니다.



- 6 재료가 완전히 세팅(자가중합 약 5분) 될 때까지 수복물을 그대로 둡니다. 혹은 약 20초간 수복물을 통하여 광중합 합니다.



seT



*Not the registered trademarks of SDI limited.
 (1) Source: Al-Naimi O.T., McCabe J. F. Fluoride release of seT self-etch/self-adhesive resin cement with that of Competitor Products (18 months report) Newcastle University, U.K. February 2007.
 (2) SDI Test Data.
 seT: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 25, No. 08. October 2008
 seT PP: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 27, No. 7, Sept. 2010, THE DENTAL ADVISOR preferred product 2011.

seT PP automix syringe refill

2 seT PP 7g automix syringes
 28 automix syringe mixing tips
 Reorder:
 8805101 A1
 8805102 A2
 8805103 OA3
 8805104 White Opaque
 8805105 Translucent

seT PP assorted automix syringe kit

1 each of A1, A2, OA3, White Opaque and Translucent
 7g seT PP automix syringes
 70 automix syringe mixing tips
 Reorder 8810002

seT capsules assorted kit

10 each of A1, A2, OA3, White Opaque & Translucent
 seT capsules
 Reorder: 8810000

seT capsules

50 seT capsules
 Reorder:
 8805001 A1
 8805002 A2
 8805003 OA3
 8805004 White Opaque
 8805005 Translucent

50 x seT PP Mixing Tips - Regular

Reorder: 8810003

10 x seT PP Mixing Tips - Wide

Reorder: 8810004

10 x seT PP Oral Tips

(To be used in conjunction with seT PP Mixing Tips - Wide)
 Reorder: 8810005

10 x seT PP Endo Tips

(To be used in conjunction with seT PP Mixing Tips - Wide)
 Reorder: 8810006



Riva Applicator 2⁺
 Reorder 5545013

Riva Applicator⁺
 Reorder 5545009



Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



경기도 고양시 덕양구 중앙로 542
 910(행신동, 세신훼밀리타운)
 Tel. 031-938-2504 Fax. 031-938-2505
 e-mail. nicelcg@naver.com

